

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Entsorgungstrommel dient zur Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Spritzen und Skalpellklingen aus dem medizinischen Bereich.

2. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die passende Trommelgröße für das entsprechende Entsorgungsgut.
- Trommel ist nur für den Gebrauch in nicht öffentlichen Bereichen vorgesehen.
- Trommel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Gegenstände nur senkrecht in die Trommel abwerfen.
- Skalpelle müssen mit besonderer Sorgfalt in der Trommel entsorgt werden. Durch zu hohe Krafteinwirkung beim Einwerfen oder beim Füllen mit anderen Gegenstände besteht die Gefahr einer Verkantung und Beschädigung der Wandungen oder des Bodens.
- Gegenstände nicht gewaltsam in die Trommel drücken.
- Den Deckel (D) nicht zum Eindrücken der zu entsorgenden Gegenstände verwenden.
- Keine Flüssigkeiten in die Trommel einfüllen.
- Trommel nicht über die Füll-Linie (F) hinaus befüllen (Verletzungsgefahr!).
- Nicht mit der Hand in die Trommel fassen (Verletzungsgefahr!).
- Trommel nicht herunterwerfen. Trommel nicht schütteln. Trommel nicht fallenlassen.
- Vor Verschluss der Trommel sicherstellen, dass keine Gegenstände aus der Öffnung herausstehen.
- Trommel nur mit den Händen und nicht gewaltsam schließen.
- Befüllte Trommel nicht von außen zusammendrücken.
- Vor der Entsorgung der Trommel genau prüfen, dass der Endverschluss (E) betätigt wurde.

Helmut Schwarz GmbH

Rengers 6 | 88316 Isny im Allgäu | Deutschland
Telefon +49 (0) 7562 9755020 | Telefax +49 (0) 7562 9755021
info@schwarz-pflegesysteme.de
www.schwarz-pflegesysteme.de

3. Täglicher Gebrauch

Für den täglichen Gebrauch den Deckel (D) in die Füllöffnung (O) eindrücken, ohne den Endverschluss (E) zu betätigen.

4. Endverschluss des Deckels (D)

Nachdem die Trommel befüllt wurde (Vorsicht: Nicht über die Füll-Linie (F) hinaus benutzen) bitte wie folgt vorgehen: Die Trommel auf einen festen Untergrund stellen und den Deckel (D) in die Füllöffnung (O) drücken, bis er hörbar einrastet. Danach den Druckknopf „PRESS FOR FINAL CLOSURE“ (E) kraftvoll mit dem Daumen eindrücken, bis die vordere Sollbruchstelle (S) abreißt. Der Druckknopf zeigt dann schräg nach unten. Den Endverschluss prüfen!

5. Füll-Linie – Maximale Füllhöhe (F)

Im oberen Teil der Trommel ist eine Füll-Linie (F) sichtbar. Auf keinen Fall die Trommel über diese Füll-Linie (F) hinaus befüllen. Die maximale Füllhöhe (F) darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.

6. Entsorgung und Kennzeichnung


Die Entsorgungstrommeln bestehen aus umweltneutralem Hartpapier und Polypropylen. Bei der Verbrennung entstehen keine schädlichen Substanzen. Bei der Entsorgung die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften beachten!

Zur Verwendung nach TRBA 250 bzw. DIN EN ISO 23907 verwenden Sie bitte die optional erhältliche Sauganlage.

Erhältliche Größen:

Art.Nr.	Artikelbezeichnung
01493511	melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 4 l
01494011	melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 6 l
01494511	melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 10 l
01494111	melijekt® Kanülen-Entsorgungstrommel 11 l

Entsorgungstrommeln Gebrauchshinweise

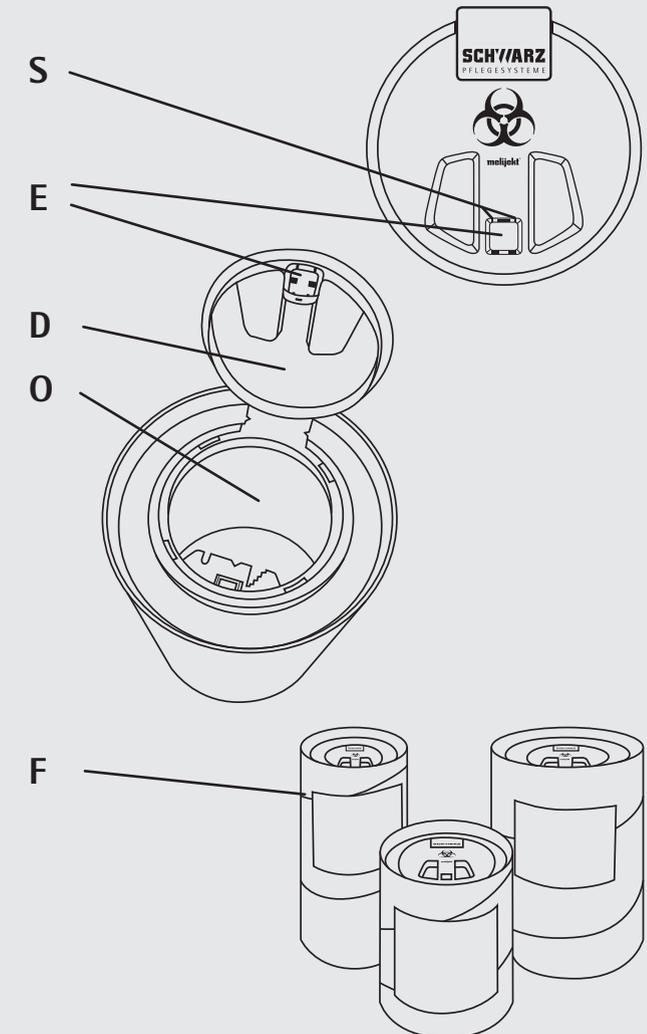

02/2019 – Änderungen vorbehalten

1. Intended use

The disposal drum is used for disposal of pointed and sharp objects such as syringes and scalpel blades from the medical field.

2. Safety instructions

- Use the appropriate drum size for the corresponding disposal item.
- Drum is intended for use in non-public areas only.
- Keep the drum out of the reach of children.
- Only drop objects vertically into the drum.
- Scalpels must be disposed of with care in the drum. Excessive force when inserting or filling with other objects may jam or damage the walls or floor.
- Do not push objects forcibly into the drum.
- Do not use the lid (D) to push in the objects to be disposed of.
- Do not pour any liquids into the drum.
- Do not fill the drum beyond the Fill Line (F) (danger of injury!).
- Do not put your hand in the drum (risk of injury!).
- Do not throw down the drum. Do not shake the drum. Do not drop the drum.
- Before closing the drum, make sure that no objects are protruding from the opening.
- Only close the drum with your hands and not forcefully.
- Do not squeeze the filled drum from the outside.
- Before disposing of the drum, make sure that the final closure (E) has been actuated.

Helmut Schwarz GmbH

Rengers 6 | 88316 Isny im Allgäu | Germany
Telefon +49 (0) 7562 9755020 | Telefax +49 (0) 7562 9755021
info@schwarz-pflegesysteme.de
www.schwarz-pflegesysteme.de

3. Daily use

For daily use, press the lid (D) into the filling opening (O) without activating the final closure pushbutton (E).

4. Final closure of the lid (D)

After the drum has been filled (Caution: Do not fill above the filling line (F)) as follows: Place the drum on a solid surface and press the lid (D) completely into the filling opening (O) until a double snap is heard. Then push the pushbutton (E) marked with "PRESS FOR FINAL CLOSURE" firmly down with your thumb until it snaps in place (S) and points diagonally downwards. Check the final closure of the lid!

5. Fill Line – Maximum Fill Height (F)

In the upper part of the drum, a Fill Line (F) is visible. Never fill the drum beyond this Fill Line (F). The maximum Fill Height (F) must not be exceeded for safety reasons.

6. Disposal and labeling


The disposal drum consist of environmentally neutral paper and polypropylene. During combustion, no harmful substances are produced. When disposing, observe the legal requirements!

For use according to TRBA 250 and DIN EN ISO 23907 please use the optionally available absorbent insert.

Available sizes:

No.	Article	Item
01493511	melijekt®	Needle Disposal Drum 4 l
01494011	melijekt®	Needle Disposal Drum 6 l
01494511	melijekt®	Needle Disposal Drum 10 l
01494111	melijekt®	Needle Disposal Drum 11 l

Needle Disposal Drum Instructions for Use

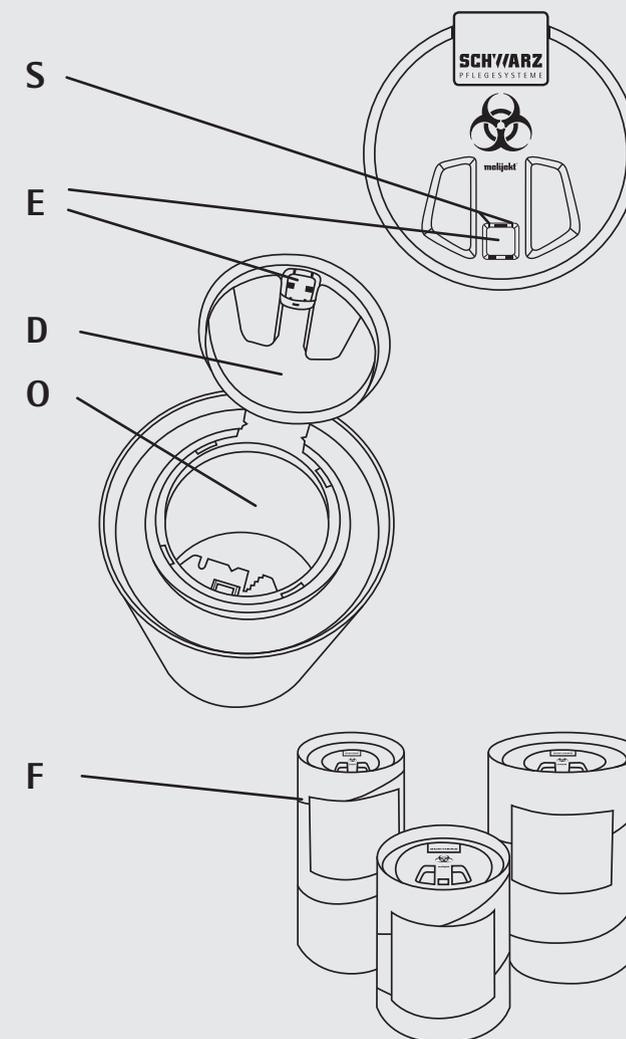

12/2018 – subject to change