

## Produktinformation


### melipul MEHRWEG-Dispenser, 8 Fächer, blau, weiß bedruckt PZN 17277125

Artikel-Nr.: 01370813

Verpackungseinheit: VE = (10 Stück)

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme

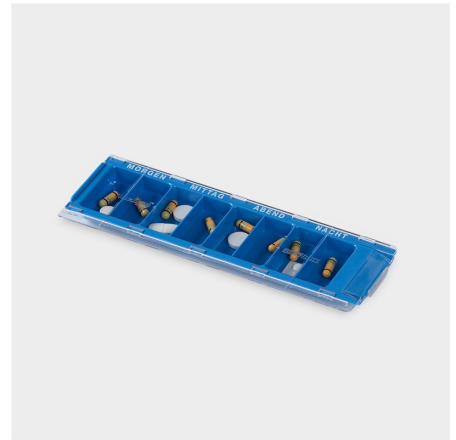

#### Beschreibung

für 1 Tag, mit 8 Fächern und Schiebedeckel, glasklar, mit zweigeteilten Fächer der Tageszeiten für Vor-, Zwischen-, Parkinson- oder Rhythmusmedikamente, Fachgröße je 25 x 47 x 15 mm, hochwertiger Kunststoff, spülmaschinengeeignet bis 93 °C, Deckel glasklar Maße: 225 x 67 x 19 mm

Ein unverzichtbarer Helfer für Parkinson erkrankte Menschen oder bei Einnahme von Rhythmusmedikamenten. Der stabile, kompakte Dispenser aus hochwertigem Kunststoff (PC) mit 8 Fächer ermöglicht das getaktete Vorbereiten der Medikation. Farbige Kennzeichnung der Tageszeiten und die zusätzliche Beschriftung der Uhrzeiten gewährleisten eine gesicherte Einnahme. Wasserfester, blauer Stift liegt bei. Der glasklare Schiebedeckel verrastet sicher mit dem Unterteil, ein ungewolltes, selbstständiges Aufschieben ist dadurch nicht möglich. Deckel und Unterteil können problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

#### Material

Polycarbonat (PC)

#### Gewicht

Stück 0,07 kg

VE (10 Stück) 0,65 kg

#### Barcodes GTIN / EAN

VE 4251125704281

#### Abmessungen L x B x H

VE 225 x 80 x 170 mm

#### Zusatzinformationen

Zolltarifnummer: 39269097

Ursprungsland: -

## **Aufbereitung und Wiederverwendung**

---

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.